

Аксессуары для полупромышленных ротационных испарителей

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47


Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

набор стекла А

Набор стекла

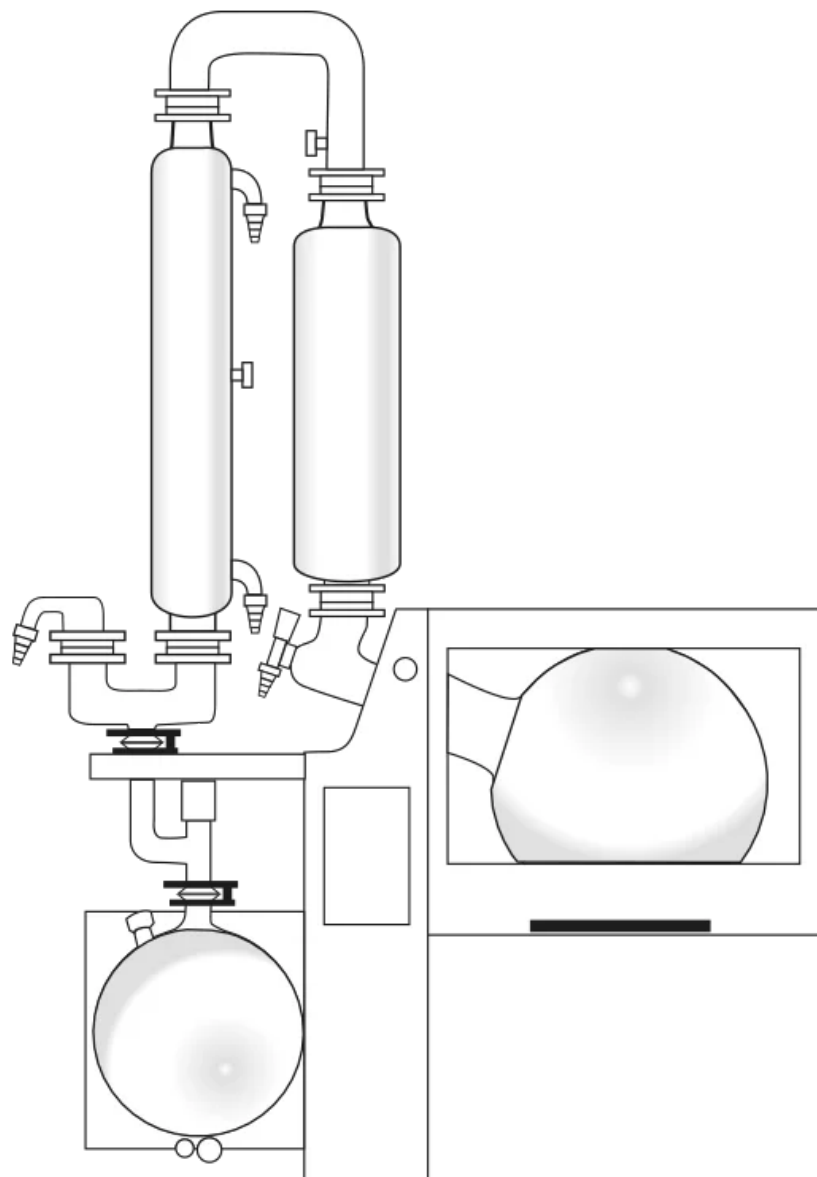

набор стекла А


Рекомендуется для растворителей, образующих брызги и пену

Этот набор стекла включает в себя:

- Один нисходящий холодильник
- Один расширенный сосуд
- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Одну 10-литровую приемную колбу

Набор стекла АС

Набор стекла

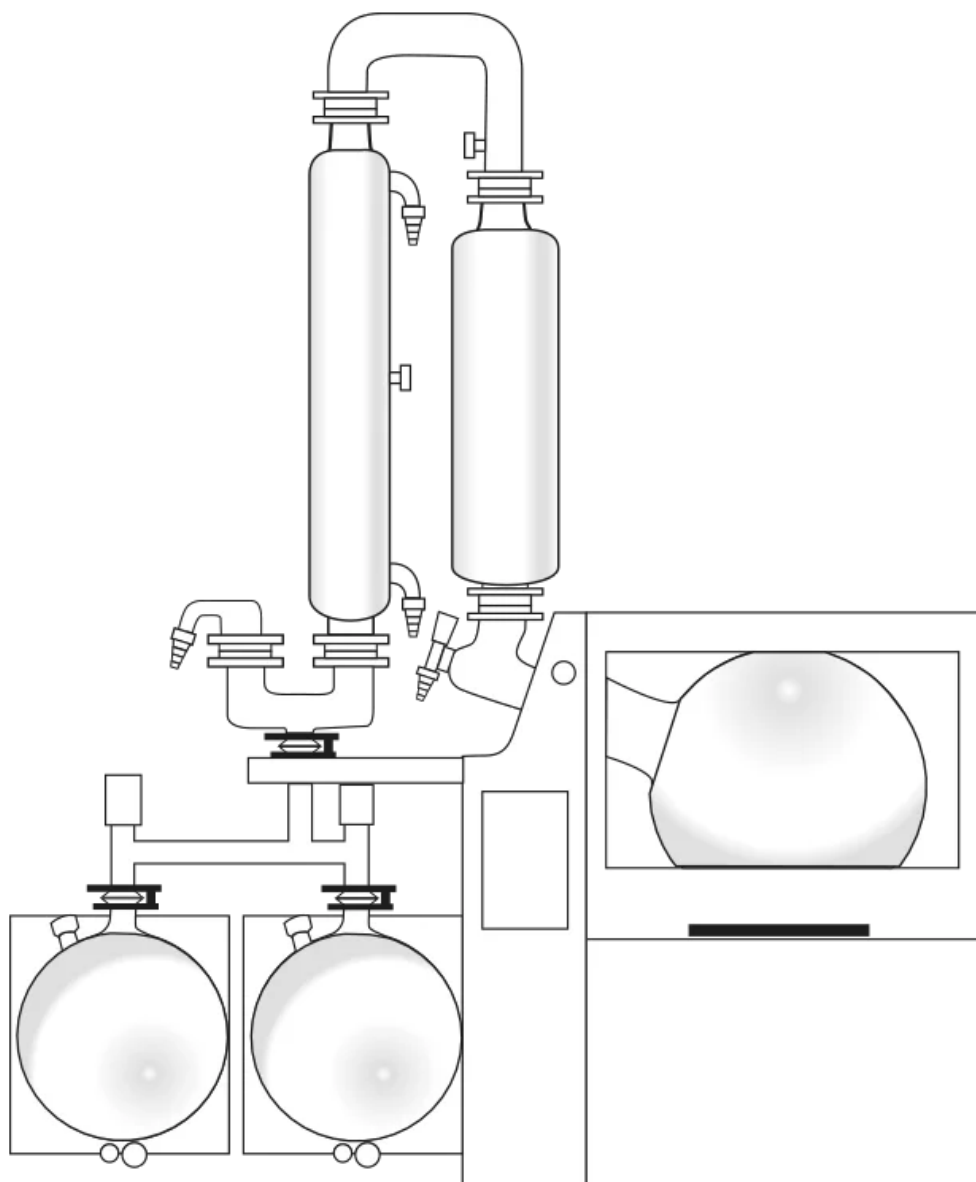

Набор стекла АС


Рекомендуется для растворителей, образующих брызги и пену

Этот набор стекла включает в себя:

- Один нисходящий холодильник
- Один расширенный сосуд
- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Две 10-литровые приемные колбы

Набор стекла A1

Набор стекла

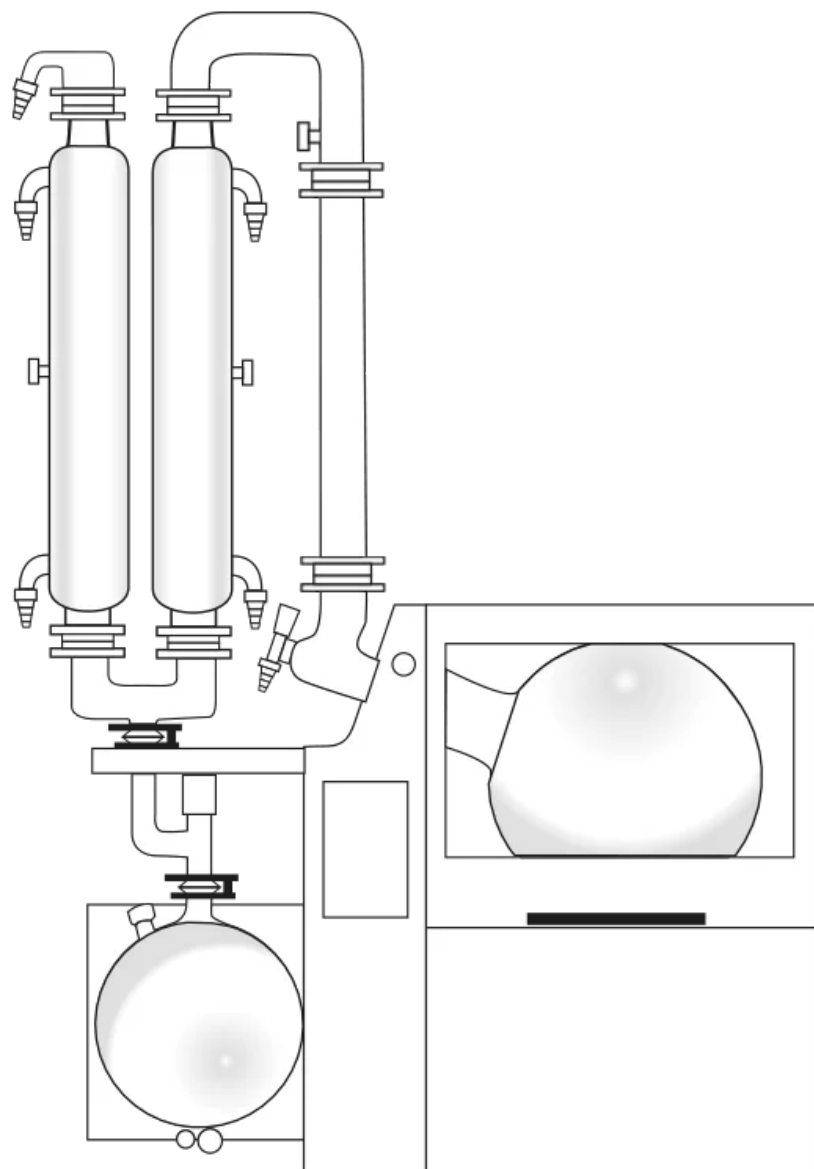


Набор стекла A1

Эффективное разделение —Комплект стекла A1:

- Комплект стекла для разделения растворителей с максимальной эффективностью
- Труба с восходящим потоком для оптимального разделения
- Нисходящий конденсатор
- Восходящий конденсатор
- Поверхность конденсации: 1.2 м²
- Подходит для большинства распространенных растворителей (включая ацетон, гексан, этанол и воду)

Набор стекла A1C

Набор стекла

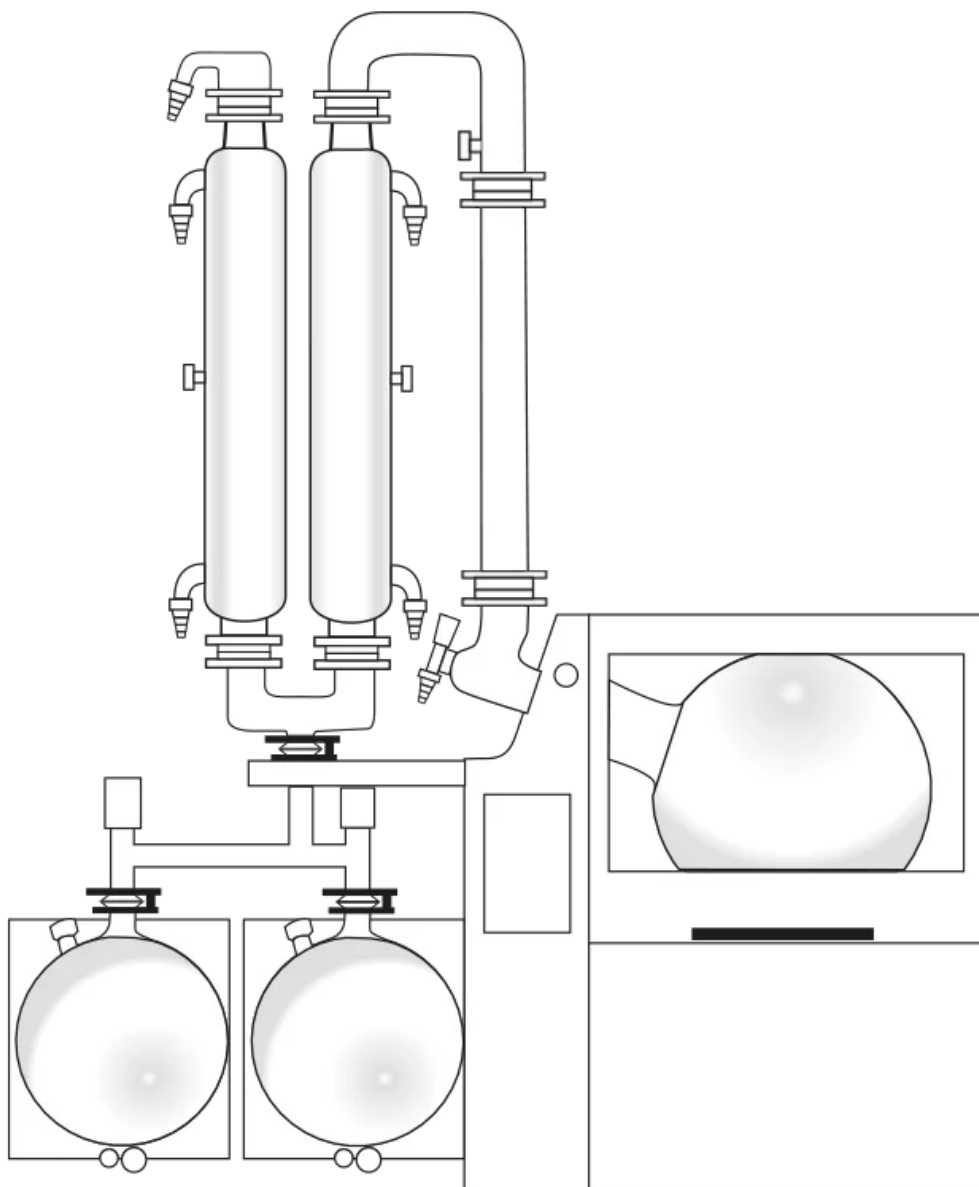

Набор стекла A1C


Для обеспечения максимальной степени регенерации при работе с низкокипящими растворителями

Этот набор стекла включает в себя:

- Один восходящий холодильник
- Один нисходящий холодильник
- Одна 20-литровая выпарная колба
- Две 10-литровые приемные колбы

Glassware A2

Набор стекла

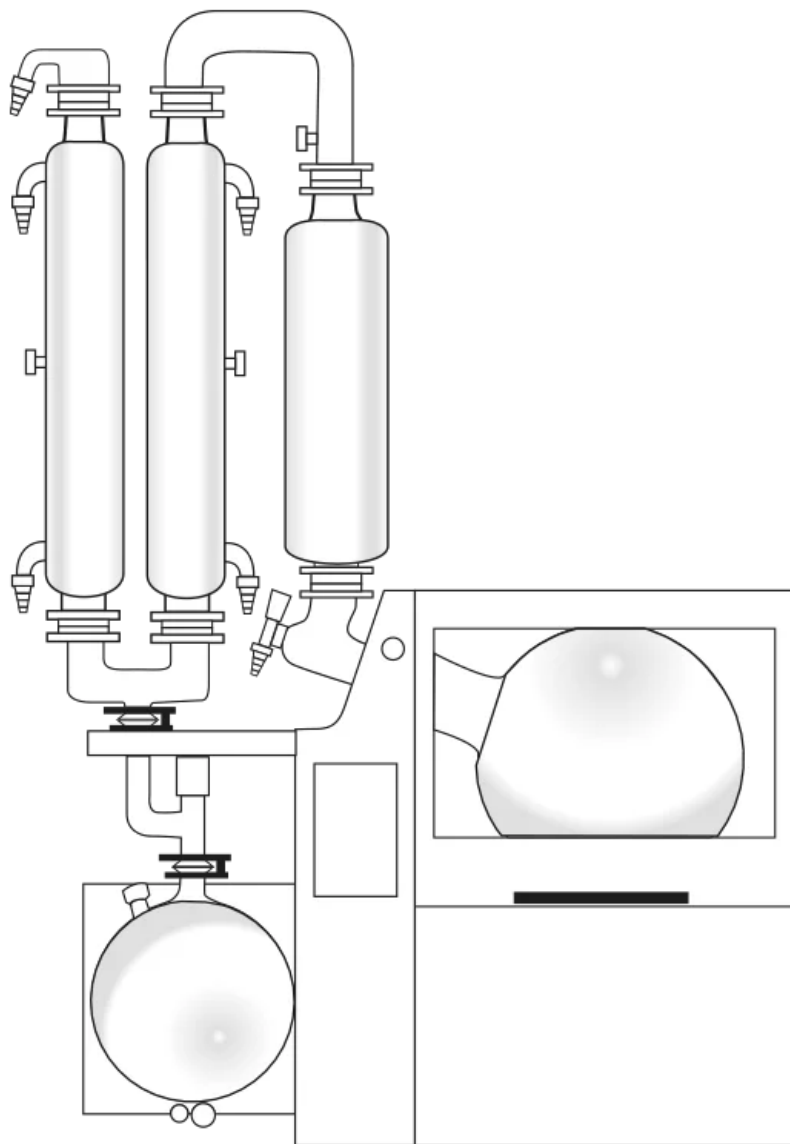


Glassware A2

Разделение пенящихся веществ с максимальной эффективностью - Комплект стекла A2:

- Комплект стекла для разделения пенящихся веществ с максимальной эффективностью
- Расширительная ёмкость для разрушения пены
- Нисходящий конденсатор
- Восходящий конденсатор
- Поверхность конденсации: 1.2 м²
- Подходит для большинства распространенных растворителей (включая ацетон, гексан, этанол и воду)

Набор стекла A2C

Набор стекла

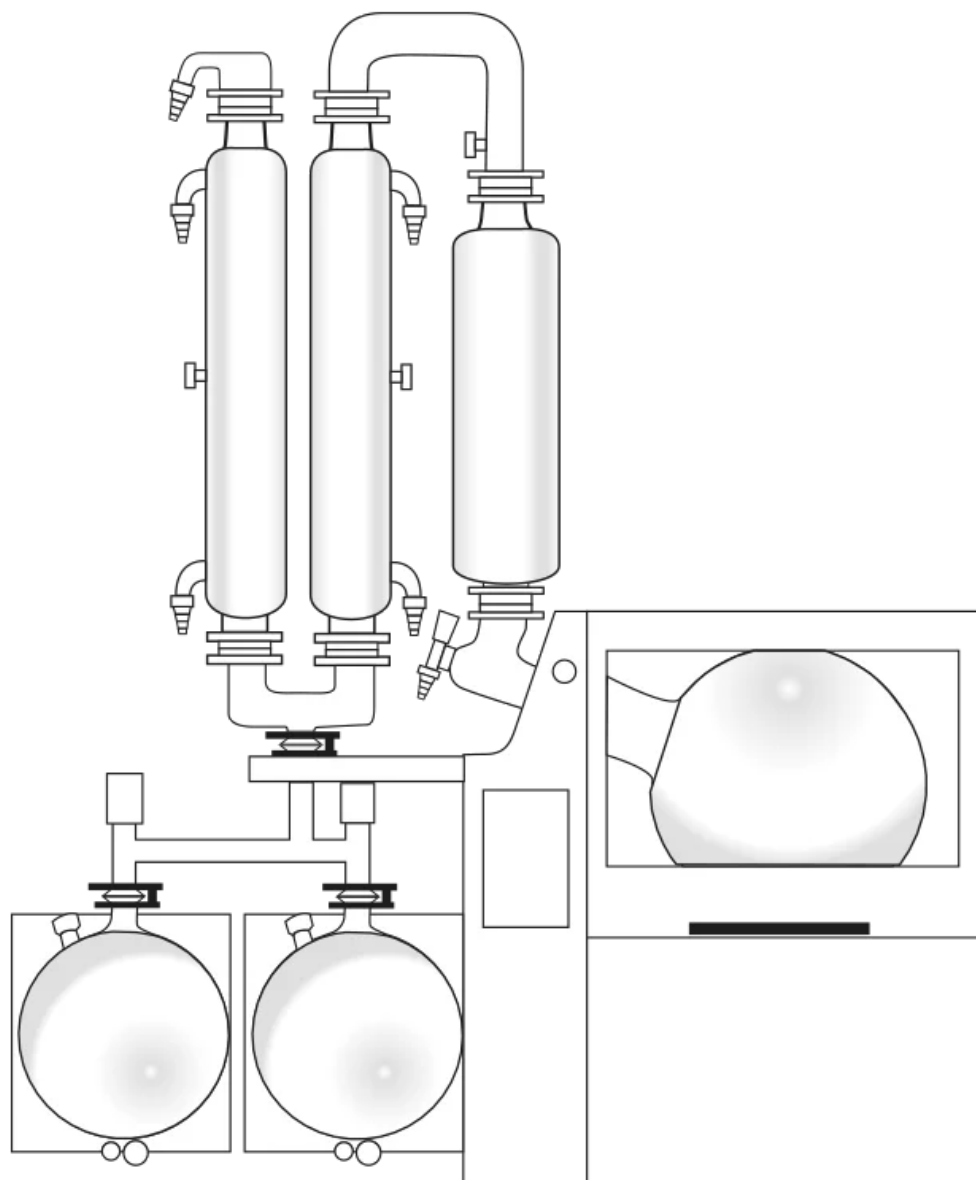

Набор стекла A2C


Для обеспечения максимальной степени регенерации при работе с низкокипящими растворителями

Этот набор стекла включает в себя:

- Один восходящий и один нисходящий холодильники
- Один расширенный сосуд
- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Две 10-литровые приемные колбы

Набор стекла К

Набор стекла

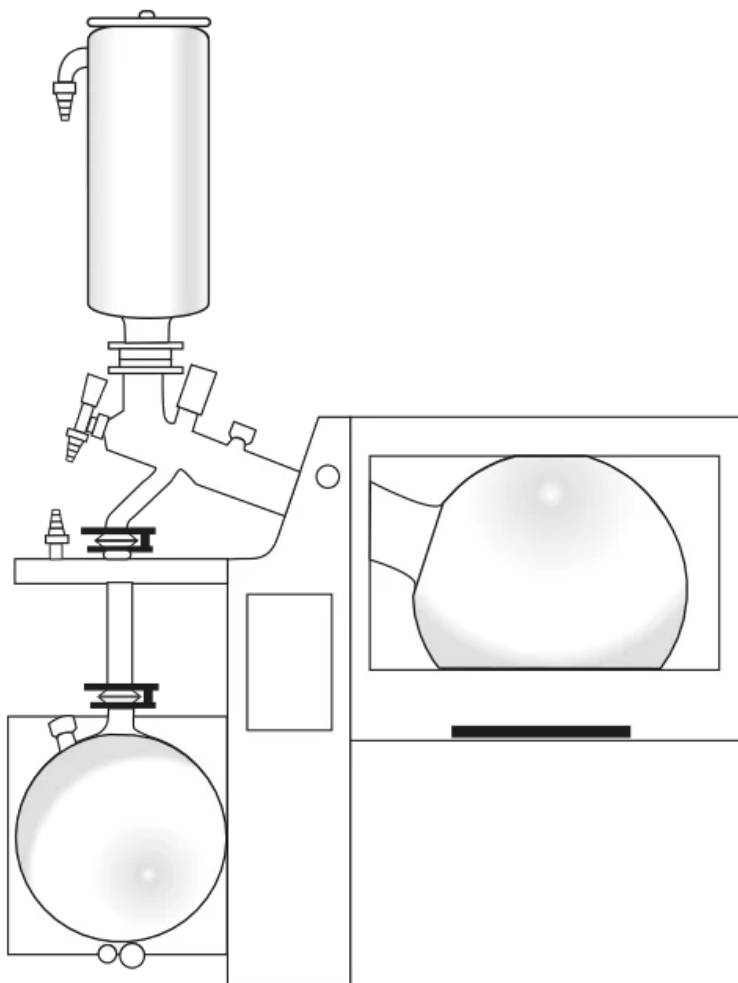

Набор стекла К


Конденсатоотводчик для низкокипящих растворителей; охлаждение сухим льдом

Этот набор стекла включает в себя:

- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Одну 10-литровую приемную колбу

Набор стекла КС

Набор стекла

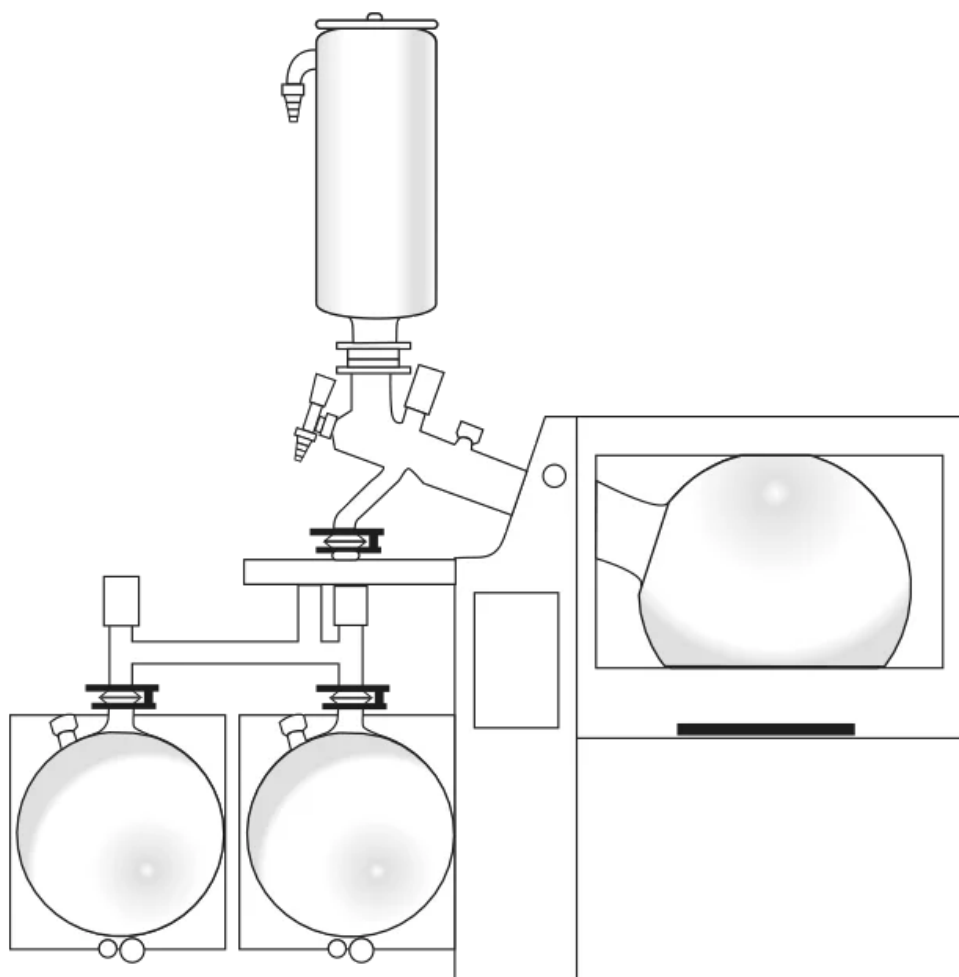

Набор стекла КС


Конденсатоотводчик для низкокипящих растворителей; охлаждение сухим льдом

Этот набор стекла включает в себя:

- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Две 10-литровые приемные колбы

Набор стекла R

Набор стекла

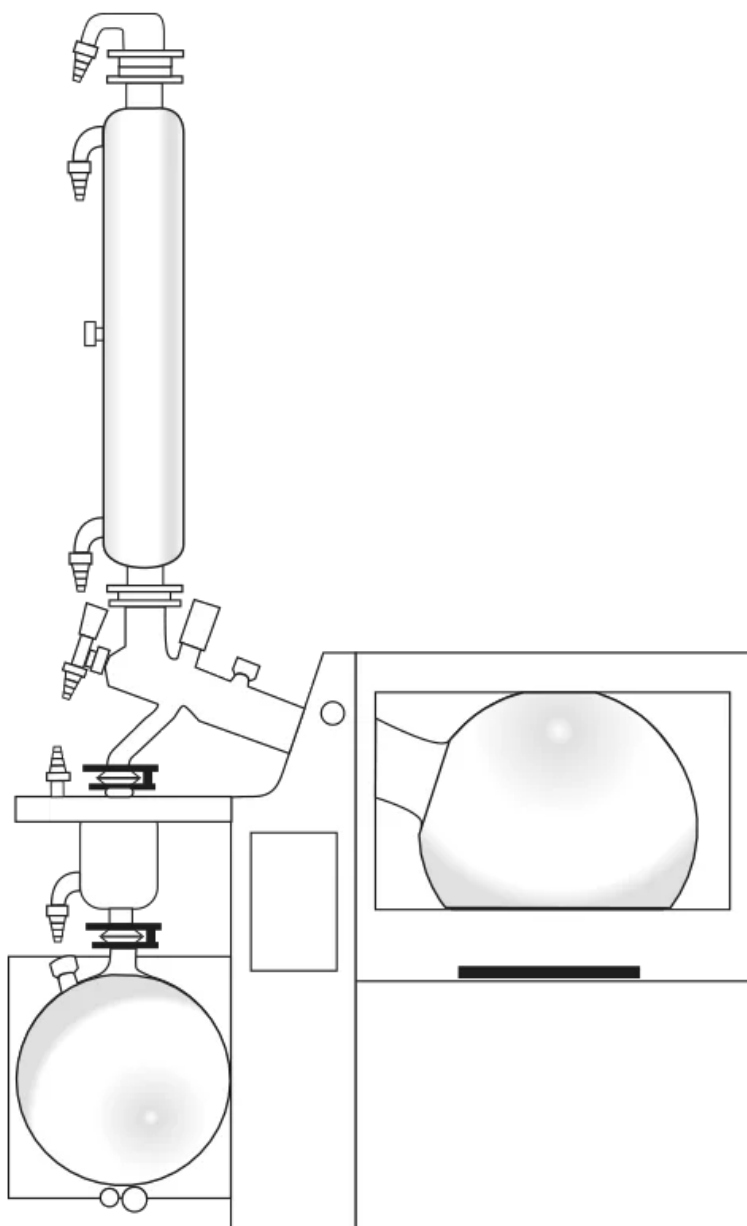


Набор стекла R

Для высококипящих жидкостей с обратным холодильником: - Комплект стекла R

- Набор стекла с запорным клапаном для работы в режиме обратной конденсации.
- Восходящий конденсатор
- Поверхность конденсации : 0.6 м²
- Для эффективного упаривания высококипящих растворителей, таких как ксилол, ДМФА, ДМСО

Набор стекла RC

Набор стекла

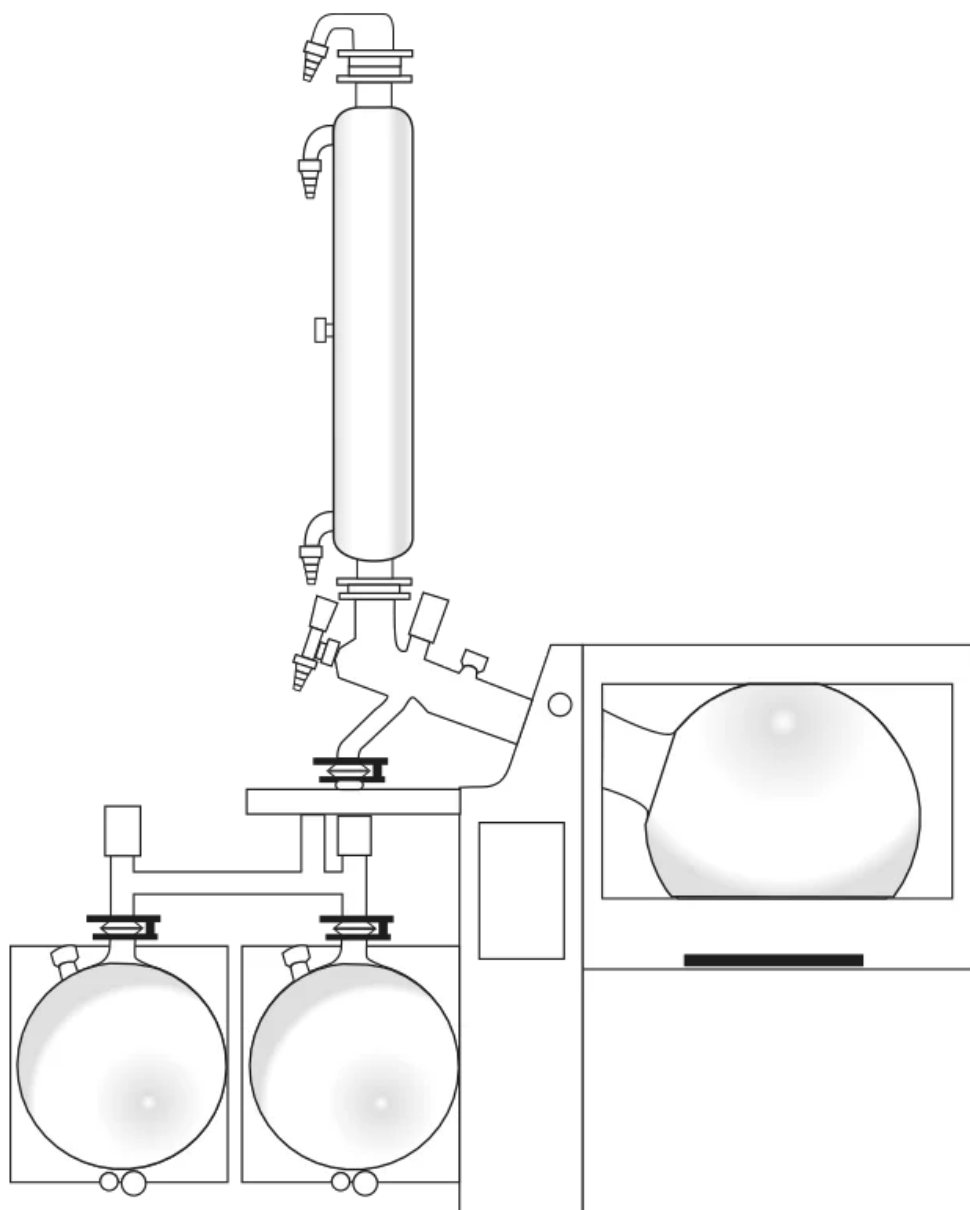

Набор стекла RC


Рекомендуется для всех стандартных процессов дистилляции

Этот набор стекла включает в себя:

- Один восходящий холодильник
- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Две 10-литровые приемные колбы

Набор стекла Shorty R

Набор стекла

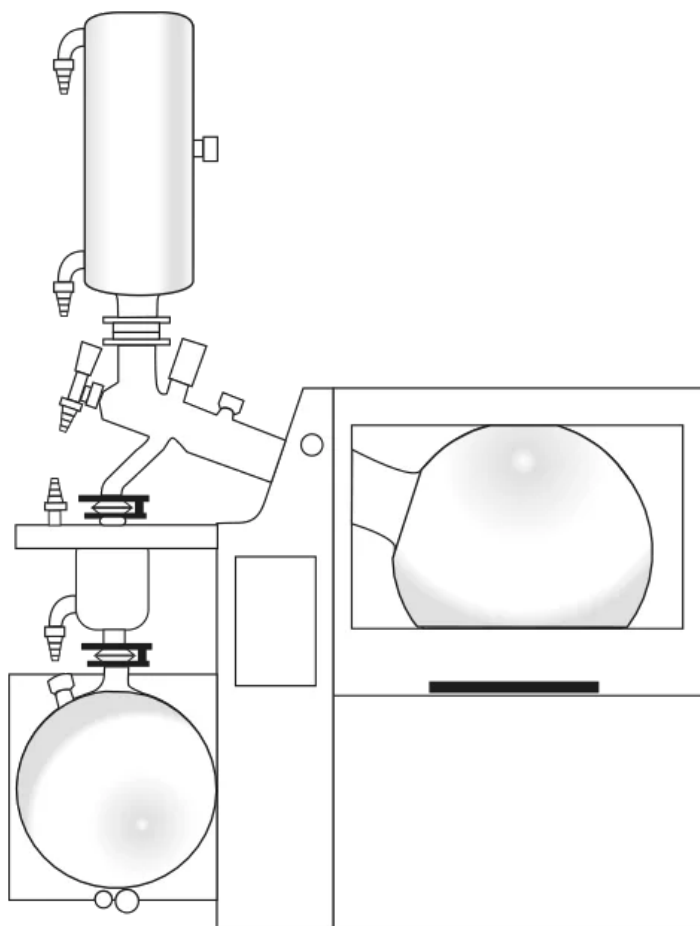

Набор стекла Shorty R

Этот комплект идеально подходит для работы в вытяжном шкафу или в помещениях с ограниченной высотой.


Холодильник на 320мм короче, чем в наборе R, но производительность дистилляции остается неизменной.

Этот набор стекла включает в себя:

- Один восходящий холодильник
- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Одну 10-литровую приемную колбу

Набор стекла Shorty RC

Набор стекла

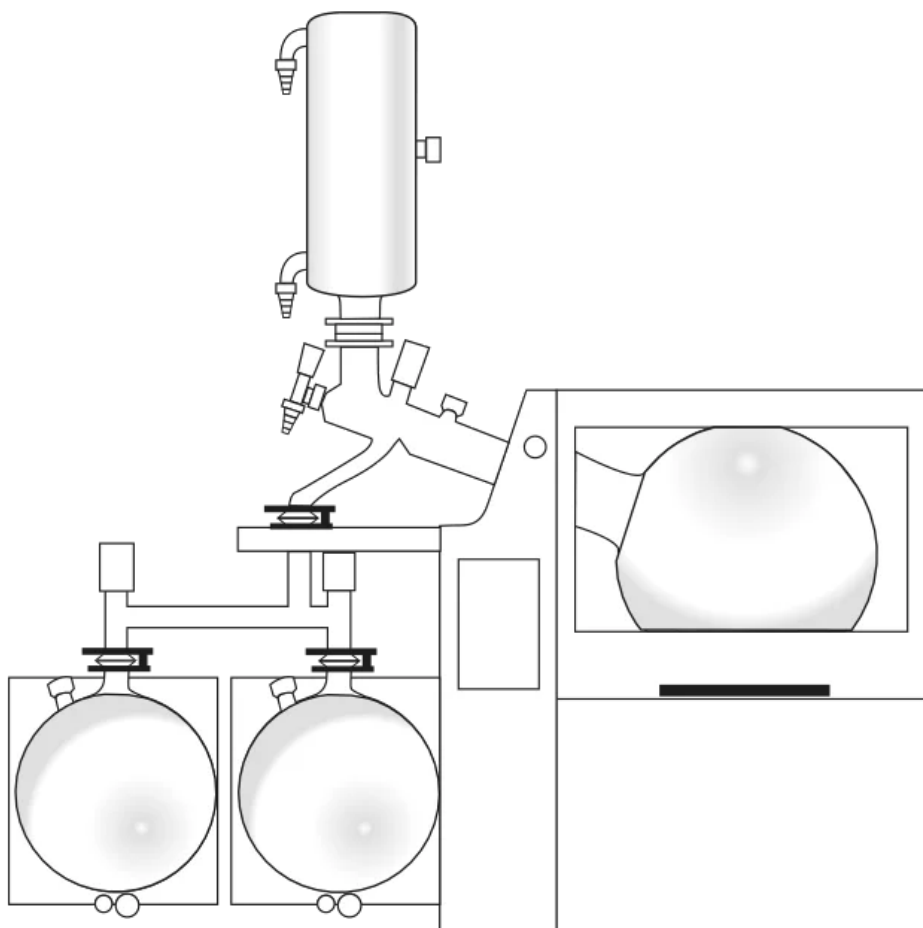

Набор стекла Shorty RC

Этот комплект идеально подходит для работы в вытяжном шкафу или в помещениях с ограниченной высотой.

Холодильник на 320мм короче, чем в наборе R, но производительность дистилляции остается неизменной.

Этот набор стекла включает в себя:

- Один восходящий холодильник
- Одну 20-литровую выпарную колбу
- Две 10-литровые приемные колбы

Выпарная колба 6 л



Кат. номер: 15-300-003-23

Выпарная колба из боросиликатного стекла Duran® объемом 6 л. Внутренний диаметр горла составляет 120 мм. Предназначена для установки на Hei-VAP Industrial с помощью крепления EASY LOCK.

Выпарная колба 10 л



Кат. номер: 15-300-003-22

Выпарная колба из боросиликатного стекла Duran® объемом 10 л. Внутренний диаметр горла составляет 120 мм. Предназначена для установки на Hei-VAP Industrial с помощью крепления EASY LOCK.

Выпарная колба 20 л



Кат. номер: 15-300-003-21

Выпарная колба из боросиликатного стекла Duran® объемом 20 л. Внутренний диаметр горла составляет 120 мм. Предназначена для установки на Hei-VAP Industrial с помощью крепления EASY LOCK.

Выпарная колба из тёмного стекла 20 л



Кат. номер: 15-300-003-31

Выпарная колба из боросиликатного стекла Duran® объемом 20 л. Тёмное стекло отлично защищает светочувствительные образцы. Внутренний диаметр горла составляет 120 мм. Предназначена для установки на Hei-VAP Industrial с помощью крепления EASY LOCK.

Колба для сушки порошков 10 л



Кат. номер: 15-300-003-24

Выпарная колба из боросиликатного стекла Duran® объёмом 10 л. Имеет рёбра на внутренней поверхности, предотвращающие агломерацию при сушке порошков. Внутренний диаметр горла составляет 120 мм. Предназначена для установки на Hei-VAP Industrial с помощью крепления EASY LOCK.

Колба для сушки порошков 20 л



Кат. номер: 15-300-003-25

Выпарная колба из боросиликатного стекла Duran® объёмом 20 л. Имеет рёбра на внутренней поверхности, предотвращающие агломерацию при сушке порошков. Внутренний диаметр горла составляет 120 мм. Предназначена для установки на Hei-VAP Industrial с помощью крепления EASY LOCK.

Приёмная колба 10 л



Кат. номер: 15-300-004-11

Приёмная колба из боросиликатного стекла Duran® объёмом 10 л. В нижней части имеет встроенный клапан для слива конденсата. Устанавливается в специальную защитную кассету.

Подставка на колёсах для Hei-VAP Industrial



Кат. номер: 591-23000-00

Для удобной установки Hei-VAP Industrial на пол и простого перемещения благодаря встроенным в подставку колесикам. Имеет место для хранения реактивов и для установки вакуумного насоса. Габариты (Д×Ш×В): 970×482×627 мм.

Датчик температуры пара



Кат. номер: 14-014-003-06

Может выполнять две функции в зависимости от места его установки. Если вы установите датчик на выходе выпарной трубки, он позволит проводить мониторинг температуры пара. Если вы установите датчик в конденсатор, он сможет функционировать в режиме AUTOaccurate для автоматической дистилляции. В комплект поставки Hei-VAP Industrial входит один датчик температуры пара. Возможна установка двух датчиков одновременно, работающих в разных режимах.

Комплект шлангов

Кат. номер: 591-34000-00



Комплект шлангов для подключения охлаждающего контура и вакуума. Включает в себя 6 м прозрачного химически стойкого шланга для вакуума и 10 м усиленного шланга для теплоносителя. Внутренний диаметр шлангов составляет 8 мм. Также в комплект поставки входят хомуты червячного типа.

Шланги по метру

дополнительные аксессуары



Шланги по метру

P/N: 591-33000-01

Шланги для подключения вакуума

Индивидуальная длина (по метру)

Шланг для охлаждения

дополнительные аксессуары



Шланг для охлаждения

P/N: 591-38000-00

Для охлаждения, внутренний диаметр Ø 8мм, продается по метру, для рабочих температур от -20 до +60 °C

Жидкость для нагревательной бани (до 170 °С)



Кат. номер: 515-31000-00

Жидкость для нагревательной бани с максимальной температурой нагрева 170 °С. Поставляется в канистре объемом 5 л.

Жидкость для нагревательной бани (до 220 °С)



Кат. номер: 569-00600-00

Жидкость для нагревательной бани с максимальной температурой нагрева 220 °С. Поставляется в канистре объемом 5 л.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	